

ACP-8EM

Projecteur de test



PERFORMANCE
YOU CAN COUNT ON

 **TOPCON**

Projecteur de test automatique ACP-8EM

Polyvalent
Rapide
Pratique
Fonctionnel

Les projecteurs de test automatiques Topcon de la série ACP-8 disposent d'une qualité d'image précise très lumineuse et d'un disque de tests à rotation rapide.

Une télécommande sans fil permet l'accès immédiat, en 0.03 seconde, à un jeu complet de 30 optotypes.

Certains de ces optotypes comportent 3 x 5 caractères projetés sur une importante surface (330 x 270), ce qui contribue grandement à la rapidité et à l'efficacité de l'utilisation de l'appareil.



Connectivité avec la tête de réfracteur CV-5000s

Le projecteur de test ACP-8EM peut être utilisé de façon autonome, utilisant une commande à distance spécifique.

L'ACP-8EM peut être utilisé également en combinaison avec un réfracteur automatique Topcon CV-5000. Le CV-5000 peut contrôler le projecteur de test ACP-8EM directement, en utilisant le pupitre tactile KB-50S ou le logiciel installé sur votre PC externe. Cette combinaison permet à l'opérateur d'utiliser l'ACP-8EM de manière la plus conviviale possible.



Programmation personnalisable


La personnalisation des projecteurs ACP-8 permet de personnaliser le défilement de la projection des tests selon vos besoins.

Projection de caractères isolés


La série des projecteurs ACP-8 dispose d'un système de masque permettant la projection d'un seul caractère à la fois.

Choix des optotypes


Deux groupes de caractères différents offrant chacun une sélection de 30 optotypes pour tenir compte des différences régionales.

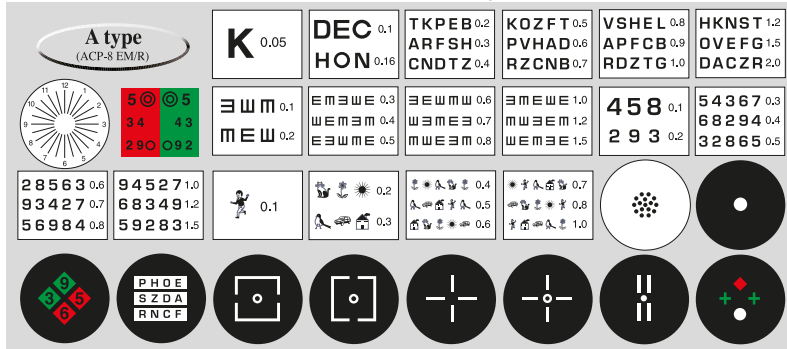


A type (ACP-8 EM)

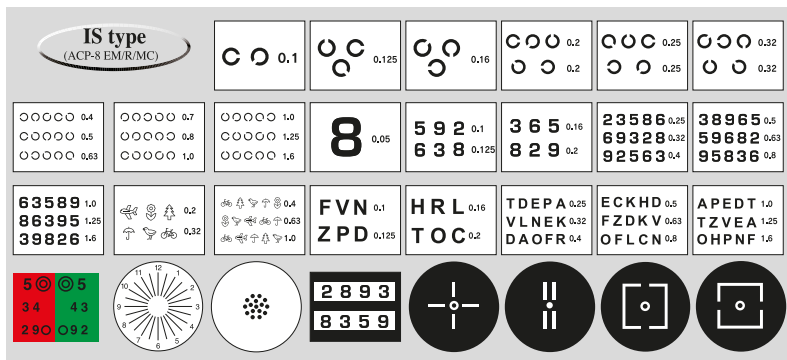

IS type (ACP-8 EM)

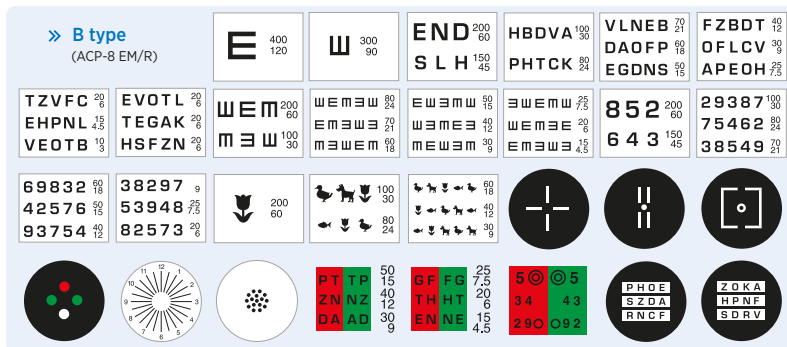

B type (ACP-8 EM)

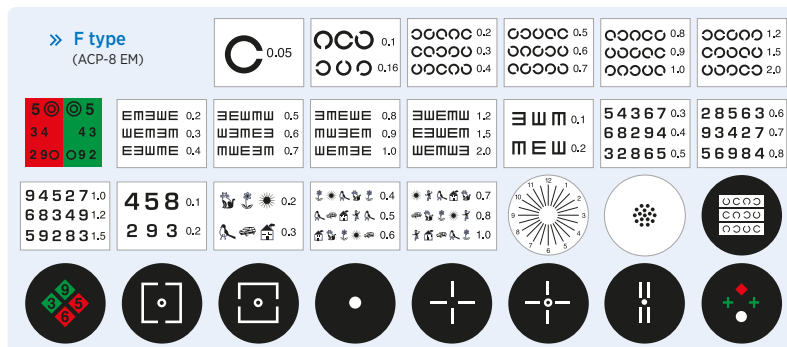

F type (ACP-8 EM)

Configuration et maintenance simplifiées

L'ampoule se remplace très facilement. Cette opération ne nécessite aucun réglage de positionnement ou de focalisation.

Réglage horizontal

L'axe horizontal du projecteur peut être ajusté pour garantir un centrage parfait sur l'écran.

Caractéristiques techniques

ACP-8EM

Distance de projection	3.0 to 6.1 m
Grossissement de la projection	30x (à 5 m de distance)
Taille de la projection	330x270 mm, Ø 300 mm
Nombre d'optotypes	30
Vitesse de défilement des tests	1 cadre / 0.03 sec
Nombres de masques	diaphragme total, 5 horizontaux, 8 verticaux, 21 caractères isolés, rouge/vert
Vitesse de changement de masque	0.02 seconde par masque
Programmation	2 types, 30 étapes programmables
Ampoule de projection	12V 50W (Halogène)
Mise en veille auto	Après 10 min
Alimentation	AC 120, 220, 230 or 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique	80 VA
Dimensions	226 (L) x 300 (P) x 245 (H) mm socle compris
Poids	6.0 kgs
Caractères disponibles	A B F IS
Masquage	Oui
Connexion IR	Oui
Télécommande	Oui

Accessoire standard



Ecran métallique polarisé
(21.7" x 17.7")

Accessoires optionnels



Support mural



Socle

IMPORTANT

Dispositif médical de classe I. Les informations contenues dans ce document sont destinées aux professionnels de santé. Lire attentivement les informations figurant dans le mode d'emploi avant utilisation. Afin d'obtenir les meilleurs résultats avec cet instrument, merci de prendre connaissance du manuel d'instructions avant utilisation.



Topcon Europe Medical B.V.
Essebaan 11; 2908 LJ Capelle a/d IJssel; P.O. Box 145;
2900 AC Capelle a/d IJssel; The Netherlands
Phone: +31-(0)10-4585077; Fax: +31-(0)10-4585045
E-mail: medical@topcon.eu; www.topcon-medical.eu

Topcon Danmark
Praestemarksvej 25; 4000 Roskilde, Danmark
Phone: +45-46-327500; Fax: +45-46-327555
E-mail: info@topcon.dk
www.topcon.dk

Topcon Scandinavia A.B.
Neogatan 2; P.O. Box 25; 43151 Mölndal, Sweden
Phone: +46-(0)31-7109200; Fax: +46-(0)31-7109249
E-mail: medical@topcon.se; www.topcon.se

Topcon España S.A.
HEAD OFFICE: Frederic Mompou, 4;
08960 Sant Just Desvern; Barcelona, Spain
Phone: +34-93-4734057; Fax: +34-93-4733932
E-mail: medica@topcon.es; www.topcon.es

Topcon Italy
Viale dell' Industria 60;
20037 Paderno Dugnano, (MI) Italy
Phone: +39-02-9186671; Fax: +39-02-91081091
E-mail: info@topcon.it; www.topcon.it

Topcon France
BAT A1; 3 route de la révolte, 93206 Saint Denis Cedex
Phone: +33-(0)1-49212323; Fax: +33-(0)1-49212324
E-mail: topcon@topcon.fr; www.topcon-medical.fr

Topcon Deutschland Medical GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41;
D-47877 Willich, Germany
Phone: (+49) 2154-885-0; Fax: (+49) 2154-885-177
E-mail: info@topcon-medical.de; www.topcon-medical.de

Topcon Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 23; 42-470 Siewierz; Poland
Phone: +48-(0)32-670-50-45; Fax: +48-(0)32-671-34-05
www.topcon-polska.pl

Topcon (Great Britain) Ltd.
Topcon House; Kennet Side; Bone Lane; Newbury
Berkshire RG14 5PX; United Kingdom
Phone: +44-(0)1635-551120; Fax: +44-(0)1635-551170
E-mail: medical@topcon.co.uk; www.topcon.co.uk

Topcon Ireland
Unit 276, Blanchardstown; Corporate Park 2
Ballycoolin; Dublin 15, Ireland
Phone: +353-18975900; Fax: +353-18293915
E-mail: medical@topcon.ie; www.topcon.ie