

IC-1 series

Colonnes murales pour instruments Gamme IC-1



L'IC-1 permet de gagner de l'espace



IC-1

La colonne IC-1 à fixation murale, permet de gagner de l'espace au sol et facilite ainsi le nettoyage. L'IC-1 est disponible en 2 coloris et existe en version 1 ou 2 instruments. L'élévation verticale du plateau permet de réaliser des examens en position assise ou debout.

Avec les supports clavier et écran en option, l'IC-1 se transforme en une véritable station de travail, qui facilite également l'accès aux fauteuils roulants. L'IC-1 combinée avec les instruments Topcon sans palonnier est la solution parfaite pour réaliser un examen des yeux sur un mètre carré seulement.

Caractéristiques

- | Design modern
- | Plateau disponible en version 1 ou 2 instruments
- | Utilisation simple
- | Accès fauteuils roulants
- | Plage d'élévation du plateau 600 mm
- | Utilisable en position assise ou debout
- | Station de travail avec supports écran et clavier

La colonne murale IC-1 est conçue spécifiquement pour accueillir la ligne d'instruments sans palonnier de Topcon. Ces instruments peuvent être installés contre un mur ou dans un coin de la salle, permettant à l'opérateur d'être positionné n'importe où autour

du patient. Le design moderne et innovant de l'IC-1 s'adapte parfaitement dans toutes les salles de consultation. Elle peut être complétée d'un PC à écran tactile et d'un support clavier pour accueillir l'OCT Maestro ou le rétinographe TRC-NW400 de Topcon.



reddot award 2014
winner

L'IC-1 a reçu le prix Red Dot en 2014, Prix du design reconnu au niveau mondial.



Nettoyage simple

L'installation murale de l'IC-1 rend le nettoyage des sols plus simple.



Supports écran / clavier


L'écran peut être positionné de chaque côté de la colonne à une hauteur ajustable, le support clavier pivotant peut être stocké sous le plateau.



Encombrement

Libérez un espace non négligeable de votre salle d'examen avec l'encombrement faible de l'IC-1. L'installation de l'IC-1 ne prendra pas plus de 0,5 m² (780 mm x 650 mm).

Colonne

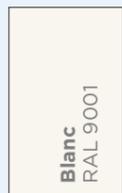

Blanc
RAL 9001



Gris Argent
RAL 9006

Caches lateraux



Bleu Topcon



Gris Foncé
RAL 7016



Erable
(Bois)

Plateau



Blanc
RAL 9001



Bleu Clair

Coloris

L'IC-1 est disponible en plusieurs configurations de coloris.



Instruments multiples

L'IC-1 est disponible avec un choix de plateaux pour 1 ou 2 instruments.



Plusieurs instruments

Le plateau de l'IC-1 peut être utilisé de 3 côtés. Cela vous permet d'installer tous les instruments avec palonnier de manière "classique", avec le patient et l'opérateur de part et d'autre de l'instrument.



Plateau surélevé

Le plateau peut être élevé de 600mm pour permettre à l'opérateur de réaliser les mesures en position assise ou debout. La hauteur minimum du plateau de 700mm permet l'examen des enfants. Le bouton montée/descente peut être installé sur le côté que vous souhaitez.



Accès fauteuil roulant

Son ergonomie unique permet de libérer de l'espace au sol et de rendre l'accès aux fauteuils roulants plus facile.

L'IC-1E, la solution pour les petits espaces

IC-1E

La colonne pour instruments IC-1E fait partie de la gamme IC-1. En comparaison avec l'IC-1, l'IC-1E permet d'utiliser la surface intégrale du plateau. L'IC-1E est disponible avec plateau 1 instrument ou 2 instruments. Le plateau existe en 2 coloris: Blanc et Bleu.

L'IC-1E est très compacte. Comme l'IC-1, la colonne pour instruments IC-1E dispose d'une plage d'élévation de 600mm. L'IC-1E est spécialement conçue pour la gamme d'instruments Topcon sans palonnier.


Caractéristiques

- | Design innovant unique
- | Gain de place incroyable
- | Accès fauteuils roulants
- | Plage d'élévation du plateau 600mm
- | Utilisable en position assise ou debout
- | Plateau disponible en version 1 ou 2 instruments



Coloris


Le plateau de l'IC-1E est disponible en 2 coloris.

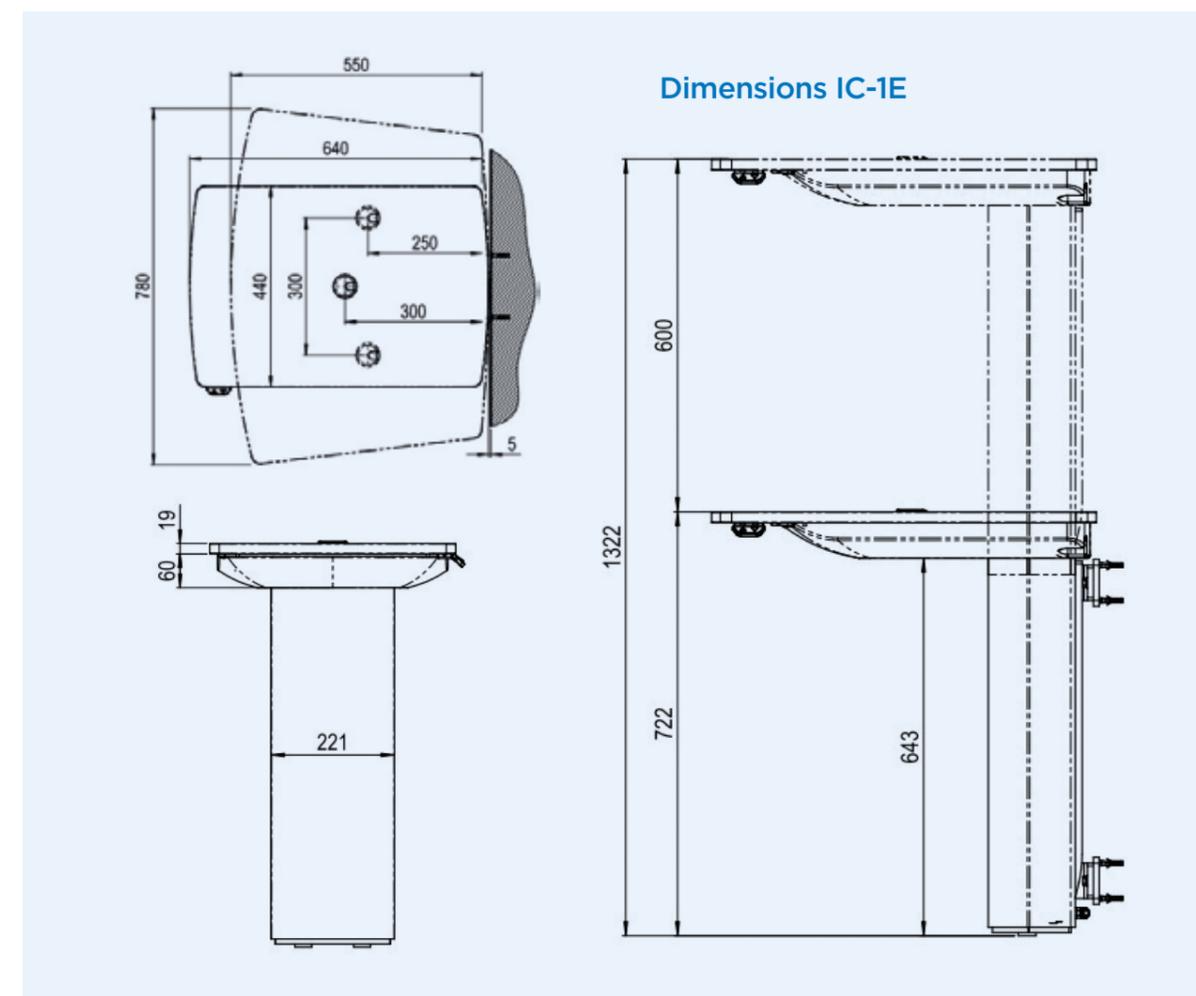

Caractéristiques

	IC-1	IC-1E
Puissance électrique totale	220-240V / 50-60Hz	90-240V / 48-63Hz
Consommation maximale	900VA @ 230V	1300VA @ 230V / 650VA @ 110V
Classification électrique	Classe I, type B	Classe I, type B
Degré de protection électrique	IP21	IP21
Plage de réglage	600 mm	600 mm
Charge maximale sur plateau 2 instruments	40 kg	40 kg
Poids net / Poids brut	53/68 kg	35/48 kg
Cycle de travail du moteur	1/9 minutes p/h	1/6 minutes p/h
Branchement	Branchement à la terre obligatoire	Branchement à la terre obligatoire

Dimensions IC-1

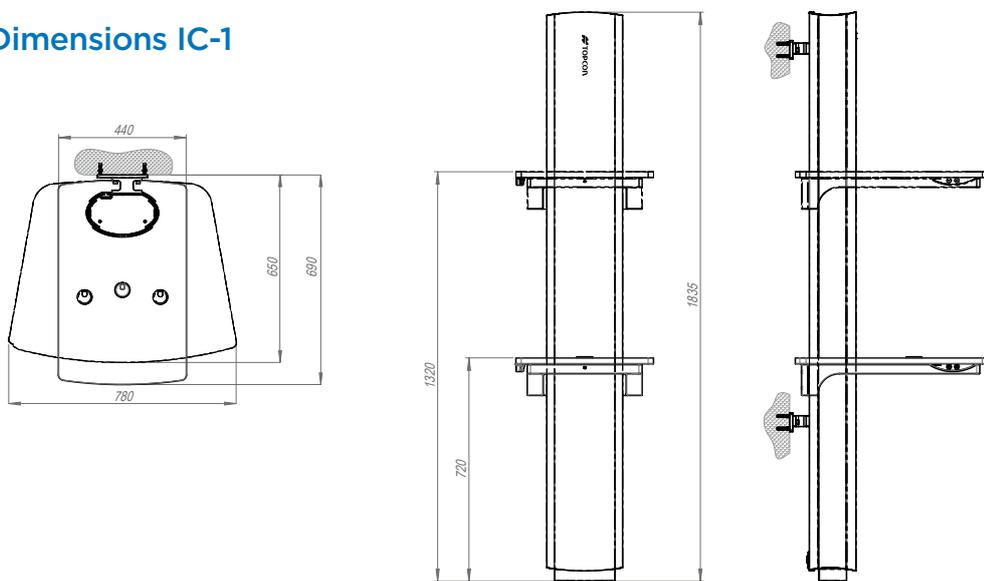

IMPORTANT

Les informations contenues dans ce document sont destinées aux professionnels de santé. Les colonnes murales pour instruments IC-1 et IC-E sont prévues pour servir de support et pour régler en hauteur les instruments ophtalmologiques. Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'instructions avant utilisation. Dispositif médical de classe I. Fabricant: Antoni Carles S.A., Espagne - Distributeur en France: Topcon France Medical S.A.S.



ANTONI CARLES S.A.

Topcon Europe Medical B.V.
Essebaan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel; P.O. Box 145;
2900 AC Capelle a/d IJssel; The Netherlands
Phone: +31-(0)10-4585077; Fax: +31-(0)10-4585045
E-mail: medical@topcon.eu; www.topcon-medical.eu

Topcon Danmark
Præstemarksvænge 25; 4000 Roskilde, Denmark
Phone: +45-46-327500; Fax: +45-46-327555
E-mail: info@topcon.dk
www.topcon.dk

Topcon Scandinavia A.B.
Neogatan 2; P.O. Box 25; 43151 Mölndal, Sweden
Phone: +46-(0)31-7109200; Fax: +46-(0)31-7109249
E-mail: medical@topcon.se; www.topcon.se

Topcon España S.A.
HEAD OFFICE; Frederic Mompou, 4;
08960 Sant Just Desvern; Barcelona, Spain
Phone: +34-93-4734057; Fax: +34-93-4733932
E-mail: medica@topcon.es; www.topcon.es

Topcon Italy
Viale dell' Industria 60;
20037 Paderno Dugnano, (MI) Italy
Phone: +39-02-9186671; Fax: +39-02-91081091
E-mail: info@topcon.it; www.topcon.it

Topcon France Medical S.A.S.
BAT A1; 3 Route de la Révolte, 93206 Saint Denis Cedex
Phone: +33-(0)1-49212323; Fax: +33-(0)1-49212324
E-mail: topconfrance@topcon.com;
www.topcon-medical.fr

Topcon Deutschland GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41;
D-47877 Willich, Germany
Phone: (+49) 2154-885-0; Fax: (+49) 2154-885-177
E-mail: info@topcon-medical.de; www.topcon-medical.de

Topcon Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 23; 42-470 Siewierz; Poland
Phone: +48-(0)32-670-50-45; Fax: +48-(0)32-671-34-05
www.topcon-polska.pl

Topcon Great Britain Medical Ltd.
Topcon House; Kennet Side; Bone Lane; Newbury
Berkshire RG14 5PX; United Kingdom
Phone: +44-(0)1635-551120; Fax: +44-(0)1635-551170
E-mail: medical@topcon.co.uk; www.topcon.co.uk

Topcon Ireland
Unit 276, Blanchardstown; Corporate Park 2
Ballycoolin; Dublin 15, Ireland
Phone: +353-18975900; Fax: +353-18293915
E-mail: medical@topcon.ie; www.topcon.ie



TOPCON EUROPE MEDICAL B.V.

Essebaan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, The Netherlands
Phone: +31-(0)10-4585077; Fax: +31-(0)10-4585045.
E-mail: medical@topcon.eu, www.topcon-medical.eu