

AIT – ATE Series

Mesas para instrumentos oftálmicos



AIT-16

AIT-16 de Topcon es una mesa oftálmica básica estable diseñada para instrumentos Topcon. Con una capacidad máxima de 50Kg, se puede colocar, inclusive un retinógrafo completo. El interruptor de arriba-abajo está adecuadamente posicionado en la columna de la mesa. El diseño compacto permite colocar los instrumentos en un espacio reducido. Se dispone de 2 tomas de corriente auxiliares. La elevación monitorizada se puede ajustar con un recorrido de 220mm. AIT-16 está equipada con unas ruedas lisas con mecanismo de freno.

Características

- » Diseño compacto
- » Largo recorrido de 220mm
- » Ruedas lisas con freno
- » 2 tomas de corriente auxiliares
- » Capacidad de carga de 50Kg





ATE-300 es una mesa para instrumento oftálmico con la certificación MDD de Topcon que dispone de una columna central y un soporte de suelo estable con acceso a silla de ruedas. Esta mesa está especialmente diseñada para instalar lámparas de hendidura Topcon, para una colocación sencilla de la mentonera y de la toma de corriente. El acabado del tablero consiste en una capa laminada resistente a los arañazos, con un perfil de goma gris oscuro como protección para las aristas. Disponible en una combinación de colores plata/blanco con recorrido de elevación de 300mm y control mediante un panel de fácil acceso. ATE-300 tiene unas ruedas de gran calidad con sistema de freno que permiten un deslizamiento fácil de la mesa.

Características

- » Diseño compacto
- » Largo recorrido de 300mm
- » Certificado MDD
- » Superficie laminada de alta resistencia
- » Ruedas de alta calidad con sistema de freno
- » En 2 colores modernos
- » Acabado en madera
- » Panel de control de fácil acceso



Blanco

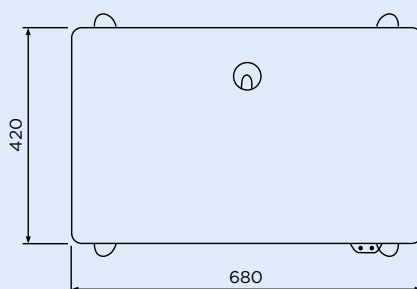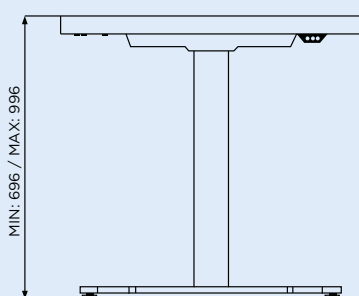

ATE-600


La mesa para instrumento oftálmico ATE-600 de Topcon tiene una columna central y está disponible con 4 tableros diferentes. Un tablero de dimensiones reducidas para un instrumento, un tablero largo para 1 instrumento, otro para 2 instrumentos y el último tablero especial en forma de V para 2 instrumentos. El color de los tableros se complementan perfectamente con el color de los instrumentos. ATE-600 dispone de ruedas lisas con freno, y tiene un recorrido vertical de 200mm.

Características

- » Carga máxima de 80Kg
- » Ruedas lisas con freno
- » Largo recorrido de 200mm
- » Disponibles 4 tamaños de tableros



Esquema ATE-600

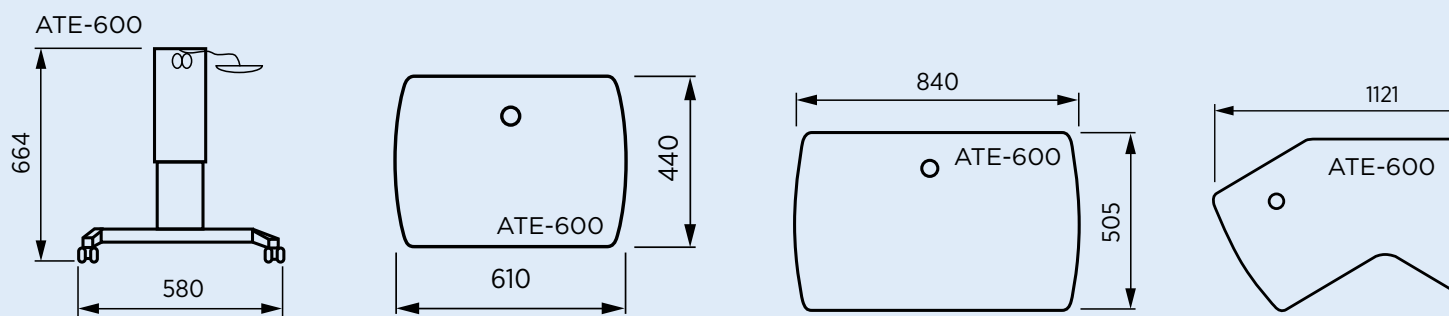


ATE-650 de Topcon tiene un tablero fijo y una columna lateral para no interferir con las piernas del paciente. El color del tablero coincide con los instrumentos Topcon. ATE-650 dispone de ruedas lisas con freno, y tiene un recorrido de 200mm. La carga máxima de ATE-650 es de 80Kg. Los botones arriba-abajo están adecuadamente colocados en el frontal del tablero para un funcionamiento más sencillo.

Características

- » Carga máxima de 80Kg
- » Ruedas lisas con freno
- » Largo recorrido de 200mm
- » Columna lateral cómoda



ATE-650 Esquema

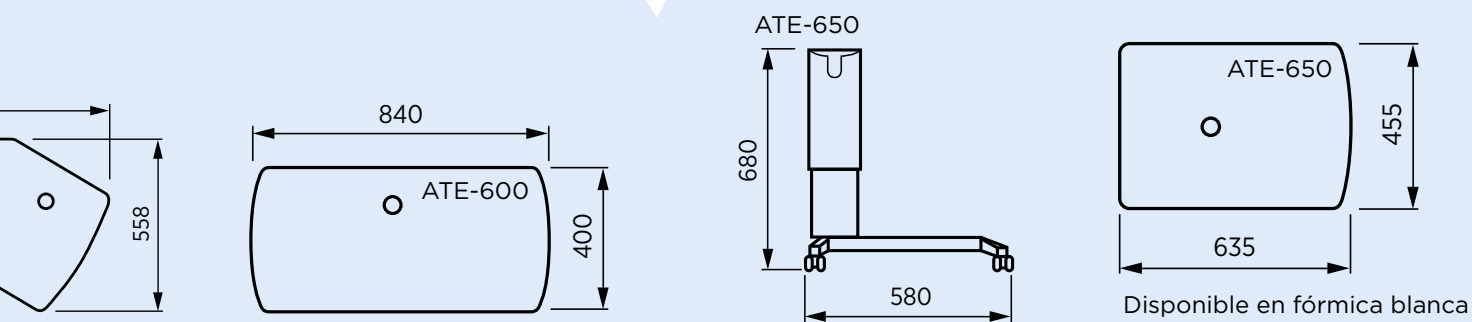

ATE-700

ATE-700 es una mesa para instrumentos con certificación MDD Topcon que tiene acceso a silla de ruedas debido a 2 columnas separadas de apoyo con elevación. En la mesa se pueden colocar uno o dos instrumentos. El tablero está disponible en color blanco con acabado de madera en las aristas. El recorrido vertical es de 300mm, controlado por un panel de control de fácil acceso, que se puede programar para memorizar 3 alturas de mesa predefinidas. Por seguridad, la ATE-700 está dotada de un freno de seguridad. Hay unas ruedas opcionales disponibles para un movimiento suave de la mesa.

Características

- » Largo recorrido de 300mm
- » Accesible para silla de ruedas
- » Freno de seguridad
- » 3 alturas memorizadas.
- » Disponibles ruedas opcionales



Diseño de madera



3 posiciones memorizadas





Freno de seguridad



Ruedas opcionales



Acceso con silla de ruedas

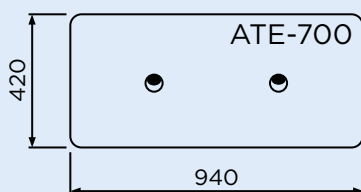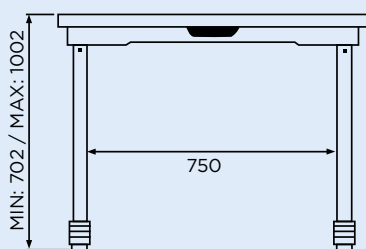

ATE-700PC

ATE-700PC es una mesa para instrumentos con certificado MDD de Topcon con acceso para silla de ruedas debido a 2 soportes separados con elevación. En la mesa se pueden colocar uno o dos instrumentos. La versión de ATE-700PC es ideal para colocar instrumentos que necesitan un soporte para PC. El tablero está disponible en color blanco con acabado en las aristas de madera. El recorrido es de 300mm, controlado mediante un panel de control de fácil acceso, que se puede programar para memorizar 3 alturas de mesa configuradas. Por seguridad ATE-700PC está dotada de freno de seguridad. Hay disponibles unas ruedas opcionales para un movimiento suave de la mesa.

Características

- » Largo recorrido de 300mm
- » Acceso para silla de ruedas
- » Freno de seguridad
- » 3 alturas memorizadas
- » Disponibles ruedas opcionales



Diseño de madera



3 posiciones memorizadas





Freno de seguridad



Ruedas opcionales



Acceso con silla de ruedas


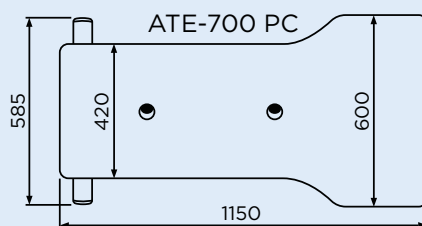
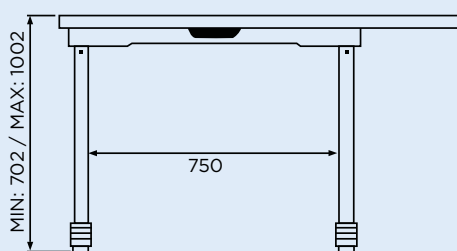


ATE-800

Tanto si se trata de una lámpara de hendidura digital con cámara digital, un OCT o un retinógrafo no midriático, el entorno de trabajo de ATE-800 le permite trabajar en un espacio despejado y limpio. Pantallas, PC y cables se instalan de forma pulida debido a un sistema de cableado integrado. La versátil ATE-800 tiene un gran recorrido vertical de 350mm. El interruptor arriba-abajo está ubicado de forma práctica en la parte superior del tablero. Por un lado, la estabilidad está garantizada gracias a un punto de gravedad bajo y unas robustas ruedas forradas de goma, mientras que la seguridad está garantizada por un tope de seguridad para la elevación.

Características

- » Carga máxima de 80Kg
- » Largo recorrido de 350mm
- » Base muy estable debido a un punto de gravedad bajo
- » Sistema de cableado integrado
- » Tope de seguridad
- » Control de botones en la parte superior del tablero
- » Acceso para silla de ruedas
- » Soporte opcional para impresora
- » Soporte opcional para PC
- » Bandeja opcional para teclado

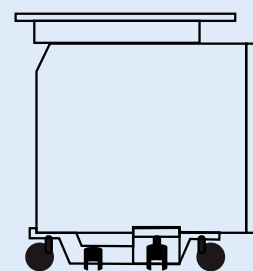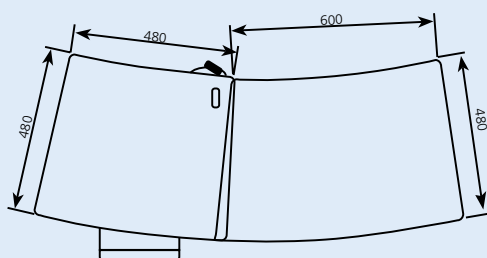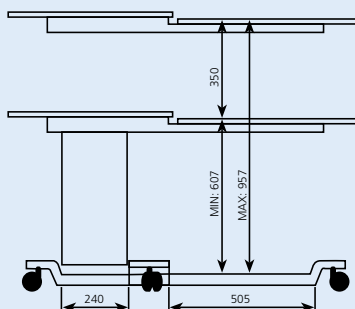

Especificaciones

	AIT-16	ATE-300	ATE-600	ATE-650
Carga máxima del tablero	50 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Máxima carga del soporte para PC	-	-	-	-
Máxima carga para soporte de impresora	-	-	-	-
Recorrido de elevación	220 mm	300 mm	200 mm	200 mm
Altura mínima de la mesa	660 mm	640 mm	666 mm	682 mm
Altura máxima de la mesa	880 mm	940 mm	866 mm	882 mm
Dimensiones del tablero	490(An.) x 500(Pr.) mm	680(An.) x 420(Pr.) mm	Mirar página de producto	635(An.) x 455(Pr.) mm
Peso neto	23 kg	30 kg	25 kg	25 kg
Peso bruto	33 kg	35 kg	35 kg	35 kg
Abastecimiento total	220-230 VAC / 50-60 Hz	90-240 VAC / 48-63 Hz	220-230 VAC / 50-60 Hz	220-230 VAC / 50-60 Hz
Consumo eléctrico máximo	270 W	1500 W	460 W	460 W
Clasificación eléctrica	Clase I, Tipo B	Clase I, Tipo B	Clase I, Tipo B	Clase I, Tipo B
Grado de protección	IP21	IP21	IP21	IP21
Protección contra shock eléctrico	Toma de tierra, Clase I tipo B	Toma de tierra, Clase I tipo B	Toma de tierra, Clase I tipo B	Toma de tierra, Clase I tipo B
Tope de seguridad	-	-	-	-
Ruedas	Sí	-	Sí	Sí

	ATE-700	ATE-700PC	ATE-800
Carga máxima del tablero	80 kg / 160 kg centred	80 kg / 160 kg centred	80 kg
Máxima carga del soporte para PC	-	10 kg	15 kg
Máxima carga para soporte de impresora	-	-	10 kg
Recorrido de elevación	300 mm	300 mm	350 mm
Altura mínima de la mesa	702 mm (no castors)	702 mm (no castors)	613 mm
Altura máxima de la mesa	1002 mm (no castors)	1002 mm (no castors)	957 mm
Dimensiones del tablero	940(An.) x 600(Pr.) mm	1150(An.) x 600(Pr.) mm	Ver página del producto
Peso neto	38 kg	50 kg	38 kg
Peso bruto	56 kg	68 kg	48 kg
Abastecimiento total	90-240 VAC / 48-63 Hz	90-240 VAC / 48-63 Hz	220-230 VAC / 50-60 Hz
Consumo eléctrico máximo	1500 W	1500 W	1300 W
Clasificación eléctrica	Clase I, Tipo B	Clase I, Tipo B	Clase I, Tipo B
Grado de protección	IP21	IP21	IP21
Protección contra shock eléctrico	Toma de tierra, Clase I tipo B	Toma de tierra, Clase I tipo B	Toma de tierra, Clase I tipo B
Tope de seguridad	Sí	Sí	Sí
Ruedas	-	-	Sí



www.facebook.com/topconespana



www.linkedin.com/company/topcon-espana



www.youtube.com/user/TopconEuropeMedical



www.flickr.com/photos/topconeupemedical/



TOPCON CORPORATION



IMPORTANTE

Sujeto a cambios en diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

Para obtener el máximo rendimiento con este equipo, asegúrese de leer detenidamente el manual de instrucciones antes de su utilización.

Topcon Europe Medical B.V.
Essebaan 11; 2908 LJ Capelle a/d IJssel; P.O. Box 145;
2900 AC Capelle a/d IJssel; The Netherlands
T: +31-(0)10-4585077; F: +31-(0)10-4585045
medical@topcon.eu; www.topcon-medical.eu

Oficina Central:
Topcon España, S.A.
Frederic Mompou, 4- Esc. A, Bjs 3
E-08960 S. Just Desvern- **BARCELONA**
tel. 93 473 40 57- fax: 93 473 39 32
medica@topcon.es- lentes@topcon.es

Delegaciones:
Centro
C/ Almirante Francisco Moreno, 5
28040 **MADRID**
tel. 91 302 41 29- fax: 91 383 38 90
madrid@topcon.es

Levante
C/ Santos Justo y Pastor, 151 Bjs
46022 **VALENCIA**
tel. 963 621 325- fax: 963 609 240
valencia@topcon.es

Norte
Iturrubide, 6
48990 Getxo- **VIZCAYA**
tel. 944 307 506- fax: 944 300 723
getxo@topcon.es

Noroeste
Xilgao, 12, Bajos
36205 Vigo- **PONTEVEDRA**
tel. 93 473 40 57- fax: 93 473 39 32
medica@topcon.es

Sur
Av. Luis de Morales, 32, Edif. Forum, Planta baja,
Local 13, 41018 **SEVILLA**
tel. 95 454 22 53- fax: 95 498 71 27
sevilla@topcon.es

Portugal
R. da Cruz, 75 – Centro Empresarial Elospark,
Ed. 3 2725-193 Mem-Martins – **Sintra Portugal**
Tel.+ 351 219 228 800
geral@taper.pt
www.taper.pt