

KR-800/RM-800

Auto Querato- Refractómetro
Auto Refractómetro



KR-800 / RM-800

valor excepcional basado en más de 60 años de experiencia



Topcon se enorgullece de introducir los nuevos Auto Querato/Refractómetros KR-800 y RM-800, los cuales incorporan las últimas novedades en tecnología y ergonomía. Los equipos cuentan con un luminoso panel de control a color con pantalla táctil de 8.5" para controlar las principales funciones y un mejorado joystick, debido a una reducción en el peso de un 23%, en comparación a modelos anteriores. Los sistemas de Topcon han sido reconocidos por su precisión, gracias a su probada Tecnología de Prisma Rotatorio. Estos nuevos instrumentos adoptan esta tecnología, con lo que puede confiar en que las mediciones sean por norma, precisas y estables. Con más de 60

años de experiencia, Topcon siempre ha tratado de ofrecer lo mejor en términos de instrumentación, lo que queda reflejado en sus diseños, funcionalidad y precisión, garantizando siempre al cliente su confianza depositada.

Características

- » Tecnología de Prisma Rotatorio de Topcon para una precisión sin precedentes
- » Facilidad de uso
- » Diseño compacto y moderno
- » Pantalla táctil LCD de 8.5 pulgadas
- » Conexión LAN

Facilidad de uso

Panel de control en pantalla táctil de 8.5'

Los nuevos KR-800/ RM-800 vienen equipados con un amplio panel de control de pantalla táctil de 8.5', la cual presenta iconos claros y fáciles de leer proporcionando al profesional un control total de la unidad durante el proceso de medición.



Movimientos suaves

La habilidad de Topcon para conseguir una reducción en el peso de aproximadamente 23%, ha contribuido a suavizar las operaciones con el equipo al utilizar el joystick. Esto contribuye a un proceso de medición más fluido y un resultado final más preciso.



Bloqueo con un solo toque

Ambos instrumentos están dotados de un cierre fácil y rápido de usar.

Impresora de carga fácil

La impresora incorporada en los nuevos equipos, ahorra tiempo al suprimir la necesidad de cargar los nuevos rollos de papel. Simplemente coloque el nuevo rollo de papel e imprima.




Tecnología exclusiva y capacidad de trabajar en red

Precisión sin precedentes

La extraordinaria *Tecnología de Prisma Rotatorio, exclusiva de Topcon, concede confianza y una precisión sin igual. Este sistema mide una área más amplia de la retina, mientras que mide pupilas estrechas de 2mm de diámetro.

* El target anular descentrado cubre áreas que pueden quedar ocluidas por pupilas estrechas. El ángulo del prisma permite medir una área de retina más amplia

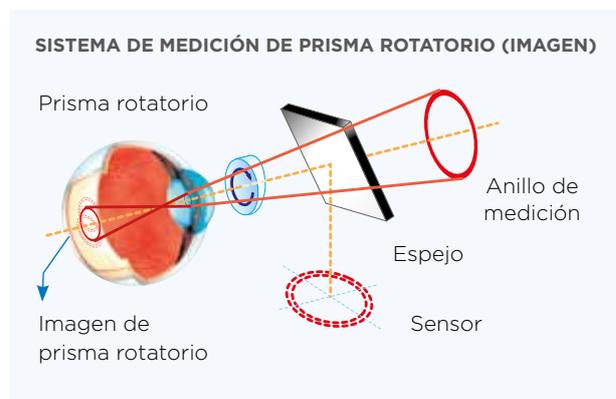

Gráfica del sistema

KR-800/RM-800
Auto Querato
Refractómetro
Auto Refractómetro

