


NUEVA GENERACIÓN DE LIO VARIFOCAL

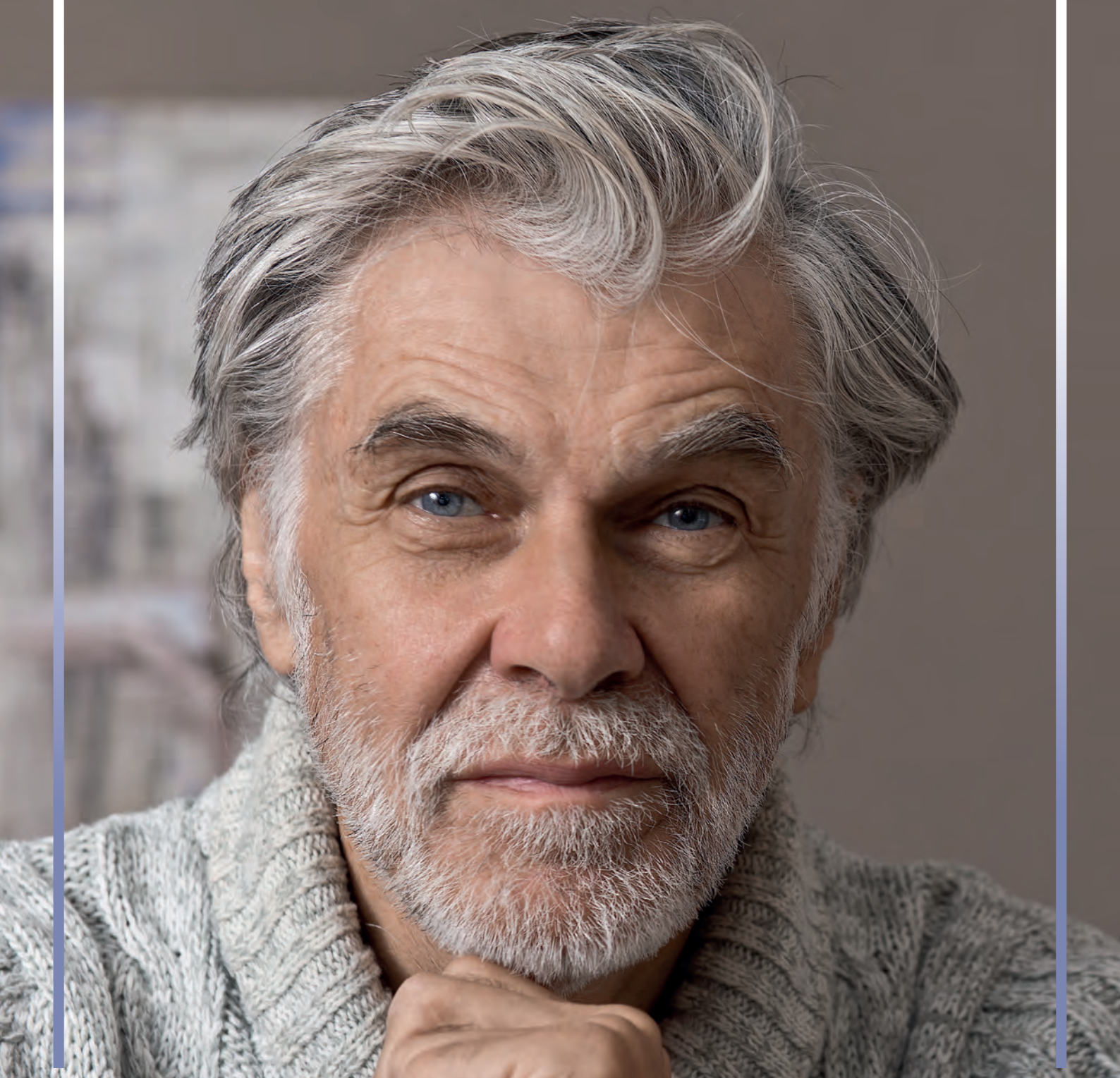

ACUNEX[®] VARIO &
ACUNEX[®] VARIO_{toric}

LA LENTE EDOF DE ELECCIÓN
PARA TODOS LOS PACIENTES

ACUNEX[®] VARIO

EXCELENTE VISIÓN GRACIAS A UNA ÓPTICA ÚNICA

TECNOLOGÍA DE FOCO CONTINUO

Mayor comodidad visual con una visión lejana excelente y un verdadero rango intermedio continuo
(Potencia EDOF „varifocal“ real)


ÓPTICA SEGMENTADA AVANZADA

Concepto probado con más de 800.000 implantes exitosos





SIGNIFICATIVAMENTE MÁS VISIÓN

que con una monofocal estándar

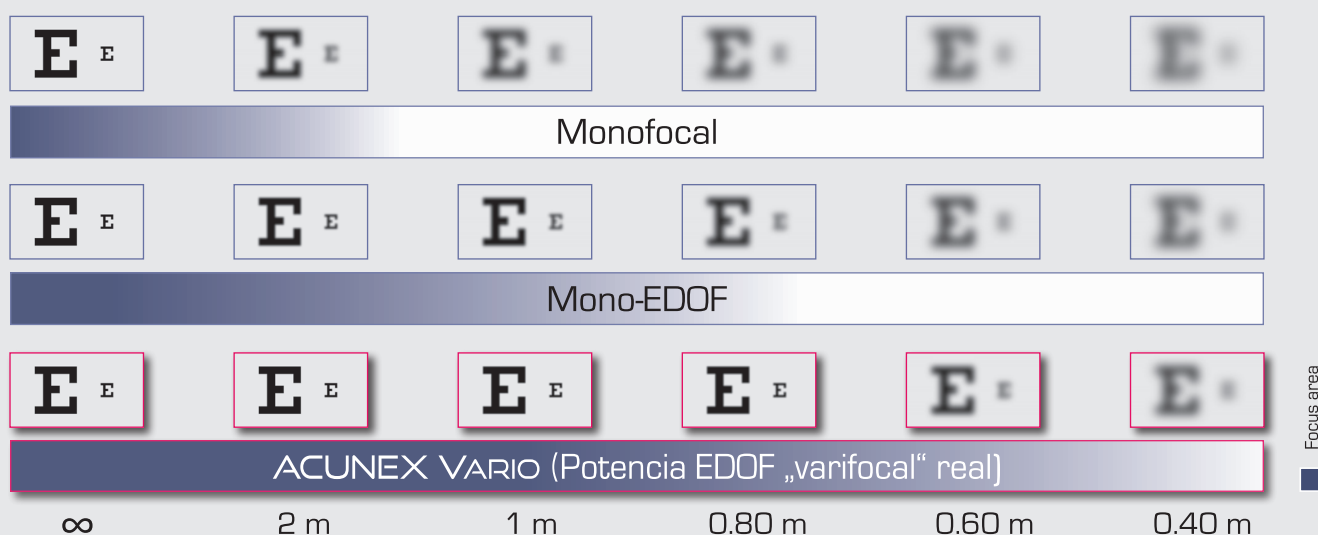


MÍNIMOS FENÓMENOS FÓTÓPTICOS

Maxima seguridad superando a todos los sistemas opticos EDOF

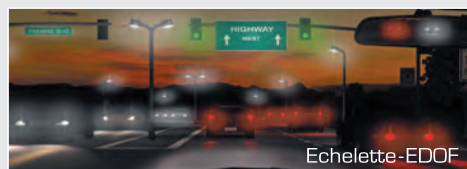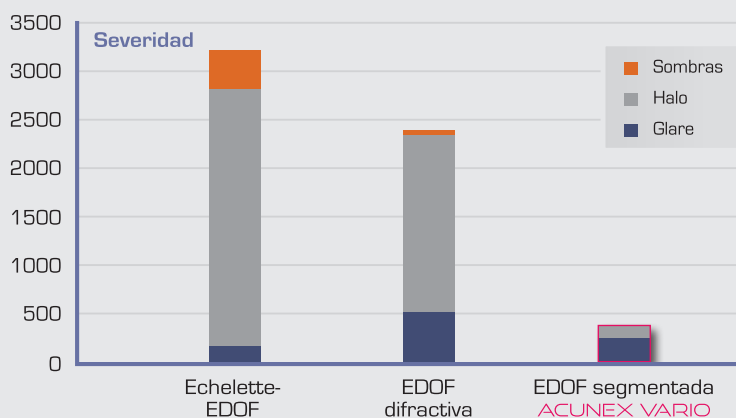


Echelette-EDOF

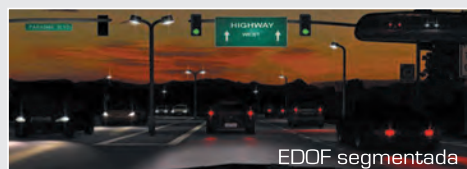


EDOF segmentada

Fuente: ESCRS Präsentation 2018,
Dr. P. Versace,


VARIFOCALIDAD A LA DISTANCIA DE LECTURA ***

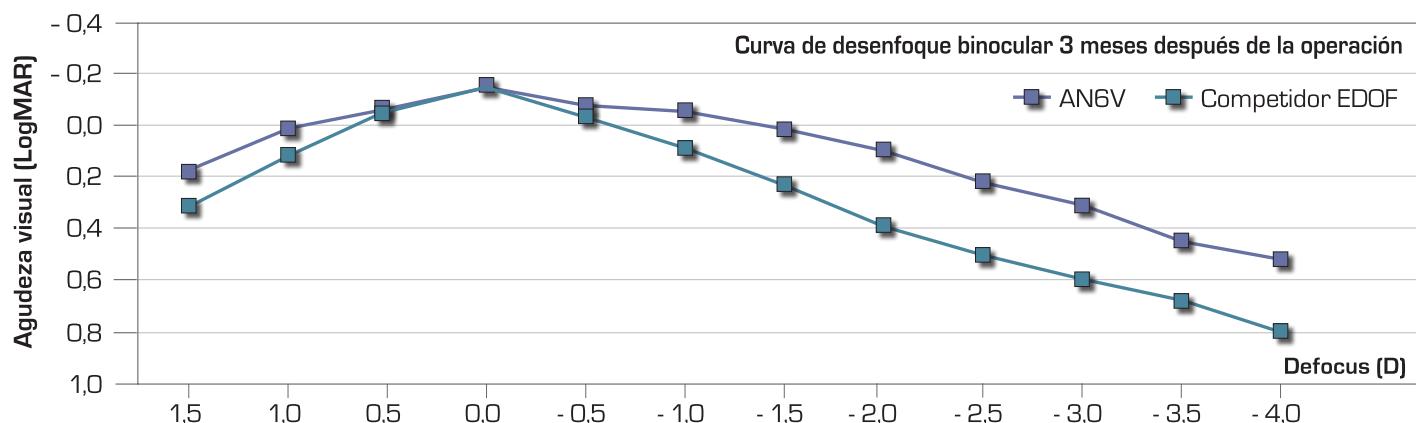


MUY BUENA VISIÓN DE CONTRASTE ***

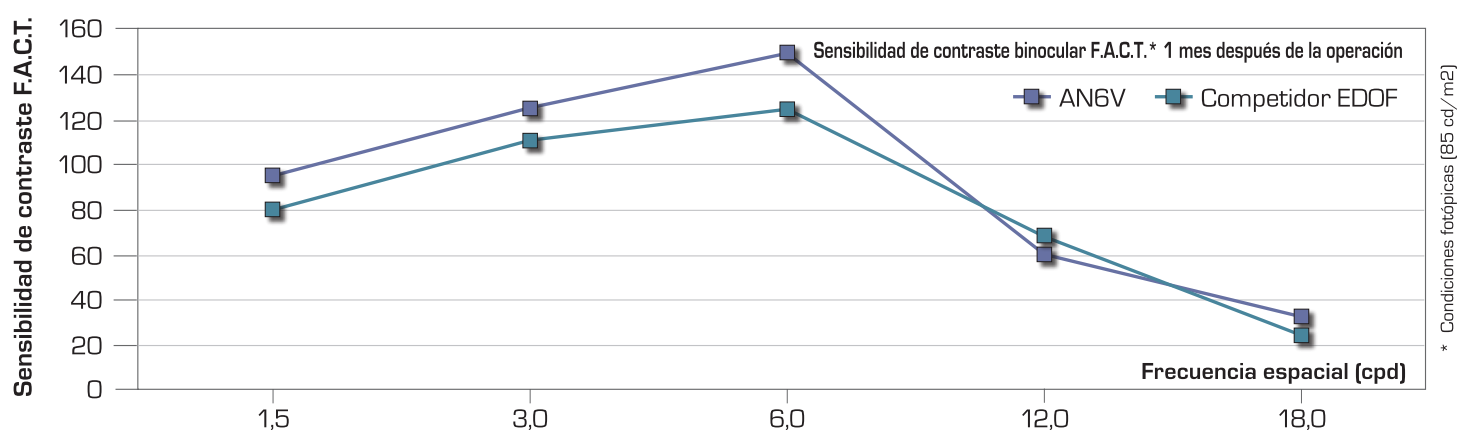

EXCELENTE ESTABILIDAD REFRACTIVA ****

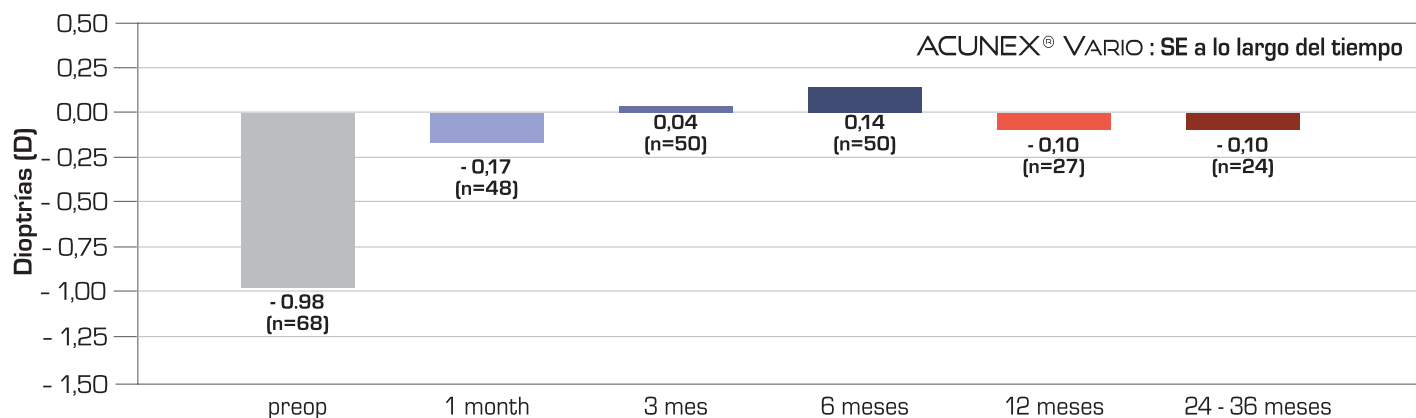


Independencia de las gafas,
distancia próxima (n.o. 42) **

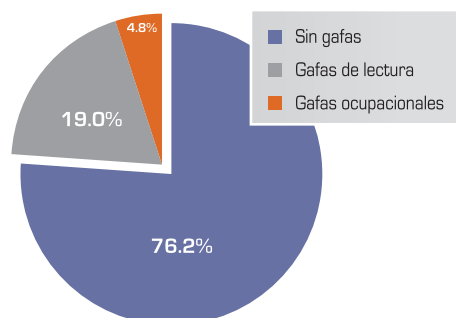


Efectos adversos (n.o. 334) **

[Glare, halo, destellos, imágenes dobles]

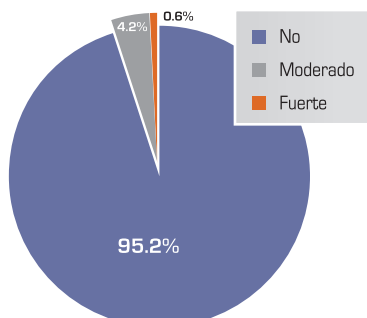


Calidad de la visión (n.o. 168) **

[Lejos e intermedio]

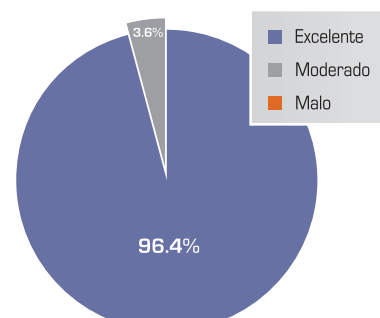

ACUNEX[®] VARIO^{toric}

CON CORRECCIÓN DE ASTIGMATISMO

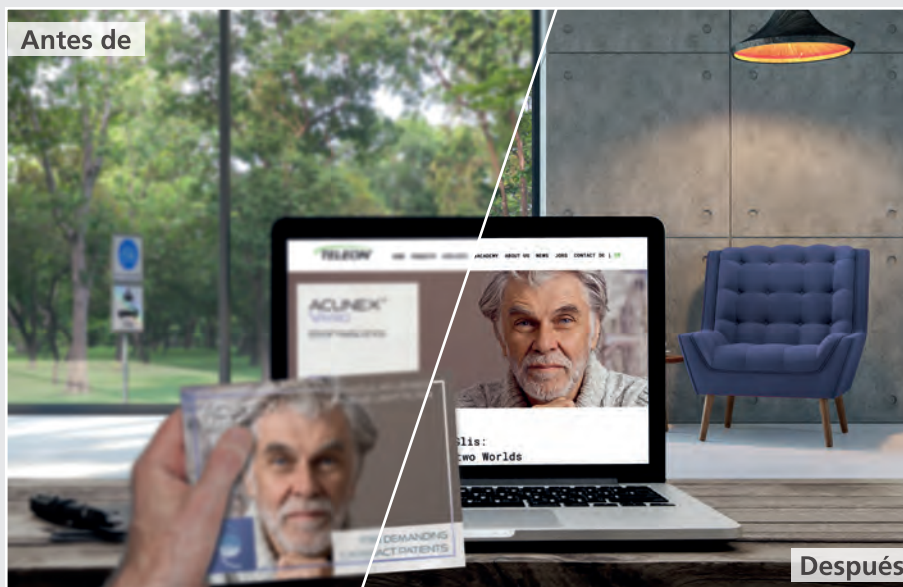

ASTIGMATISMO

Visión deficiente a todas las distancias, debido a la curvatura irregular de la córnea.

50%

de los
pacientes
no tienen
astigmatismo

VISIÓN
sin
astigmatismo

E E

El otro
50%
de los
pacientes
necesitan **más**

ACUNEX[®]
VARIO^{toric}


VISIÓN
con
astigmatismo

E E



Con la ACUNEX[®] VARIO^{toric} tiene la LIO EDOF perfecta para corregir el astigmatismo. Disponible con cilindros estándar de 0,75 D a 3,00 D en pasos de 0,75 D.

Lente EDOF de cámara posterior, de una pieza con una profundidad de rango extendida y una alta sensibilidad de contraste con superficie asférica y filtro de luz azul

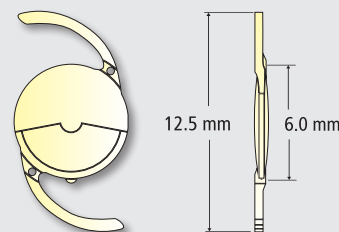


Producto		asférico
ACUNEX® VARIO AN6V		EDOF
Tipo	LIO EDOF de una pieza, flexible, para implantación en el saco capsular	filtro de luz azul
Tamaño de óptica	6,0 mm	Glistening-free
Longitud total	12,5 mm	
Angulación háptica	0°	
Diseño de óptica	Biconvexo Óptica Refractiva, Segmentada, con adición de +1.5 D Superficie asférica - posterior Aberración esférica neutra	
Diseño de LIO	Hapticas en C-loop	
Material	Acrilato hidrofóbico, Glistening-free Absorbente de UV y filtro de luz azul adicional	
Dioptrías disponibles	SE +10,0 D a +30,0 D (0,5 D)	
Índice refractivo	1,54 a 35°	
A-constante (nominal)	119,1	
Esterilización	Esterilización gamma	
Almacenamiento	Suministrado en solución salina al 0,9 %	

LA NUEVA LIO PREMIUM PARA TODOS

VENTAJAS DEL ACUNEX® VARIO

- Mayor **satisfacción del paciente**
- Más **independencia de las gafas** y mejor calidad de vida
- Excelente **sensibilidad al contraste**
- Bio-material certificado por la **FDA**

Lente EDOF Tórica de cámara posterior, de una pieza con una profundidad de rango extendida y una alta sensibilidad de contraste con superficie asférica y filtro de luz azul

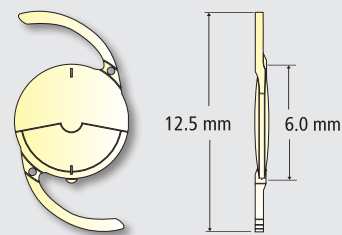

Producto		ACUNEX® VARIOTORIC AN6VTO-T3	asférico
Tipo	LIO EDOF TÓRICA de una pieza, flexible, para implantación en el saco capsular		EDOF
Tamaño de óptica	6,0 mm		filtro de luz azul
Longitud total	12,5 mm		Glistening-free
Angulación háptica	0°		tórico estándar
Diseño de óptica	Biconvexo Óptica Refractiva, Segmentada, con adición de +1.5 D Superficie asférica y tórica - posterior Aberración esférica neutra		
Diseño de LIO	Hapticas en C-loop		
Material	Acrilato hidrófobo Glistening-free Absorbente de UV y filtro de luz azul adicional		
Dioptrías disponibles	SE +10.0 D a +30.0 D (0.5 D) cil.: TO +0.75 D T1 +1.5 D T2 +2.25 D T3 +3.0 D		
Índice refractivo	1,54 a 35°		
A-constante (nominal)	119,1		
Esterilización	Esterilización gamma		
Almacenamiento	Suministrado en solución salina al 0,9 %		

FABRICANTE:

TELEON®

Teleon Surgical B.V.

Van Rensselaerweg 4 b
NL- 6956 AV Spankeren

✉ marketing@teleon-surgical.com
 🌐 www.teleon-surgical.com